

暮らし、イロドル



Life on Products



モットル

取扱説明書

MTL-B010

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

警⚠告



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵


- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

もくじ


はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称と付属品	2 ページ
	安全上のご注意	3～4 ページ
使い方	ご使用方法	5～6ページ
	電池について	6 ページ
困ったときは	故障かな?	7 ページ
	アフターサービス	8 ページ
	仕様	9 ページ

各部名称と付属品

<各部名称>

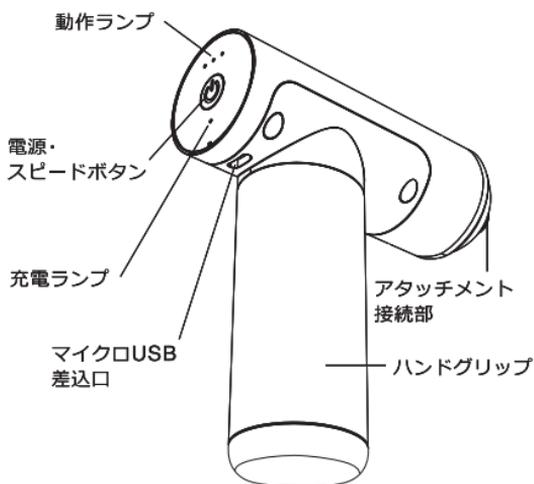

<付属品>

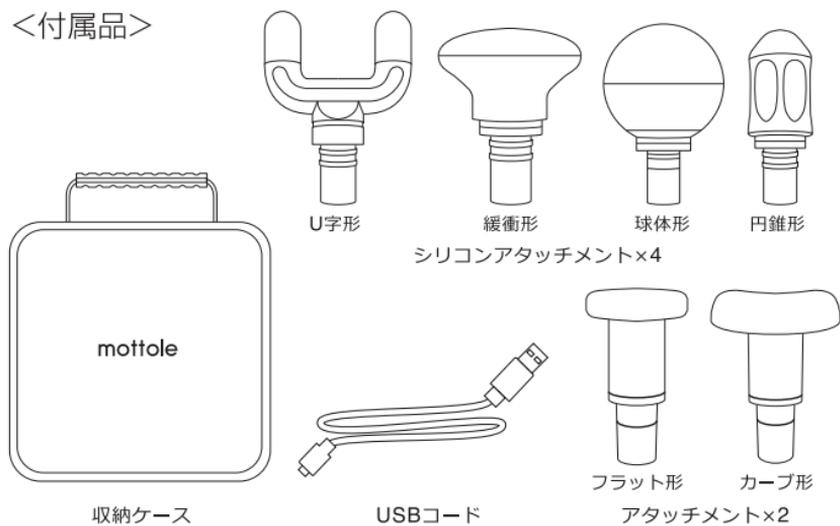

安全上のご注意 必ずお守りください

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよく読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



Li-ion

警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



改造禁止

発火したり、異常動作してケガをする可能性があります。

充電台を水につけたり、水をかけたりしないでください。



禁止

故障や感電のおそれがあります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

発火、破裂の原因となります。

頭、心臓の近く、性器、骨や関節に使用しないでください。



禁止

けがや事故のおそれがあります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

火災やショート、感電の原因となります。

USB接続式ACアダプターをご使用ください。



強制

火災やショート、感電の原因となります。

⚠ 注意

<p>使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池には寿命があります。機器の使用時間が短くなったときは、分解して取り出さず回収ボックスに捨ててください。</p>	<p>液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自自治体の指示に従って廃棄してください。</p> <p> 発火や爆発のおそれがありますので、一般の燃えないゴミには出さないでください。</p>
<p>炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。</p> <p> リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。</p>	<p>本製品は60℃未満の場所で保管してください。</p> <p> リチウムイオン電池の耐熱温度は60℃です。高温になる場所に放置しないでください。</p>
<p>ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。</p> <p> 45℃以上の環境で使用するとバッテリーの劣化を招きます。</p>	<p>幼児の手の届くところに保管しないでください。</p> <p> けがや事故のおそれがあります。</p>
<p>お子様には使用させないでください。</p> <p> けがや事故のおそれがあります。</p>	<p>付属のUSBコードが傷んだり差し込みが緩いときは使用しないでください。</p> <p> 火災やショート、感電の原因となります。</p>
<p>一か所に過度に集中して使用しないでください。</p> <p> けがや事故のおそれがあります。</p>	

下記の人は医師とご相談のうえ、使用してください。

- ・妊娠中、出産直前、糖尿病、神経障害や網膜障害などの合併症を含む方。
- ・ペースメーカーの使用、近日中に手術をした方、てんかんや偏頭痛、腰椎椎間板ヘルニア、むち打ちの方。
- ・近日中に人工関節置換術をした方、子宮内避妊具装着、金属インプラントなど身体に不安のある方。
- ・悪性腫瘍のある方
- ・心臓に障害のある方
- ・重度の血行障害がある方
- ・体温38℃以上の方（有熱期）

ご使用方法


本体の充電




付属のUSBコードをUSB接続式の充電器に繋いで充電してください。
充電中はLEDが赤色に点灯し、完了するとLEDが緑に点灯します。

ご使用方法

アタッチメント接続部にお好みのアタッチメントを取り付けます。


アタッチメントを接続部に根元までしっかりまっすぐ押し込んでください。

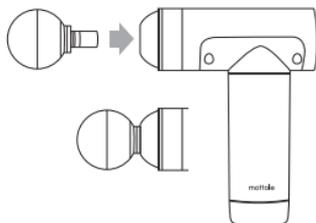

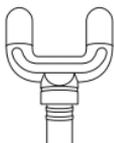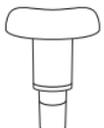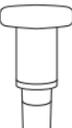部位別 オススメ アタッチメント		
 <p>球体形 親指感触 シリコン製</p> <ul style="list-style-type: none">・太もも・背中・臀部	 <p>緩衝形 親指感触 シリコン製</p> <ul style="list-style-type: none">・肩・首や鎖骨・デコルテ部分	 <p>円錐形 親指感触 シリコン製</p> <ul style="list-style-type: none">・足裏・手のひら・関節周り
 <p>U字形 親指感触 シリコン製</p> <ul style="list-style-type: none">・前腕・脊柱・アキレス腱	 <p>カーブ形 固め感触 ABS樹脂</p> <ul style="list-style-type: none">・背中・太もも・腰など	 <p>フラット形 固め感触 ABS樹脂</p> <ul style="list-style-type: none">・ふくらはぎ・二の腕 <p>あらゆる部位に対応</p>

電源ボタンを長押しすると低速モードで作動します。

電源・スピードボタンを押して振動速度を調整します。
電源スイッチを長押しすると低速モードで作動します。
もう一度押すと中速モード、もう一度押すと高速モードになります。
もう一度押すとスタンバイになり、もう一度押すと低速モードにもどります。
長押しするとオフになります。

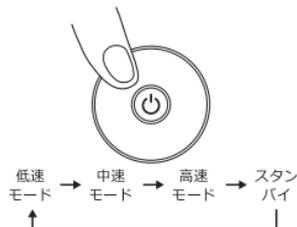


ご使用方法

気になる部位に押し当てながら強さを調整します。

振動は最弱レベルから始めるのがオススメです。部位に応じて徐々に振動を強くしてください。事故やケガ、体調不良の原因になるため、同じ部分に長時間当て過ぎないようにお気をつけください。

起動後10分で自動停止します。
電源ボタン長押しで停止します。

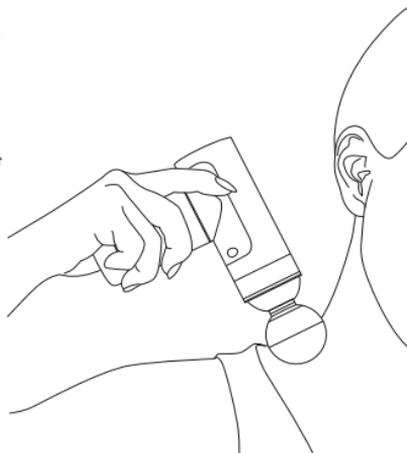

電池について

※リチウムイオン電池は消耗品ですので、保証対象外となります。

内蔵のリチウムイオン電池は約 300 回充放電できます。ただし、使用環境や使用時間などで大きく変化します。

⚠ 注意

- ・お客様自身で充電電池の交換はしないでください。
(各都道府県・市町村の指定場所、もしくは量販店のリサイクルコーナーに捨ててください)

リチウムイオン電池のリサイクルについて



- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては分解せず、専用の回収ボックスに捨ててください。
- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。

故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない	充電が切れている。	充電してください。
充電してもすぐに充電切れになる	充電池の寿命。	充電池には寿命があります。
充電できない	充電器が正しくセットされていない。	ACアダプターをしっかりとコンセントに差し込んでください。 USBコードをしっかりとACアダプターに差し込んでください。 充電表示ランプが点灯しているか確認してください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

消耗品・部品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。

▶ mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び部品に関しましては、メールにてお問い合わせください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。16時以降のご連絡に関しましては、翌営業日中にお返事をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

仕様

品番	MTL-B010
電源	DC5V 1A (充電時)
消費電力 (約)	35W
電源コード(約)	USBコード : 500mm (Type-C)
満充電時の合計 使用可能時間(約)	6時間 (弱) ~3.5時間 (強)
振動スピード(約)	弱 : 2000rpm、中 : 2400rpm、強 : 2800rpm(±20%)
充電電池	リチウムイオンバッテリー3.7V 4800mAh
充電時間(約)	5時間
オートオフ(約)	10分
サイズ (約)	116×43×148mm
重量 (約)	447g

※ 製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。



暮らし、イロドル
Life on Products



@lifeonproducts



Life on Products